


MÓDULOS DEL EQUIPAMIENTO:



BOTONES DEL MÓDULO MURAL:

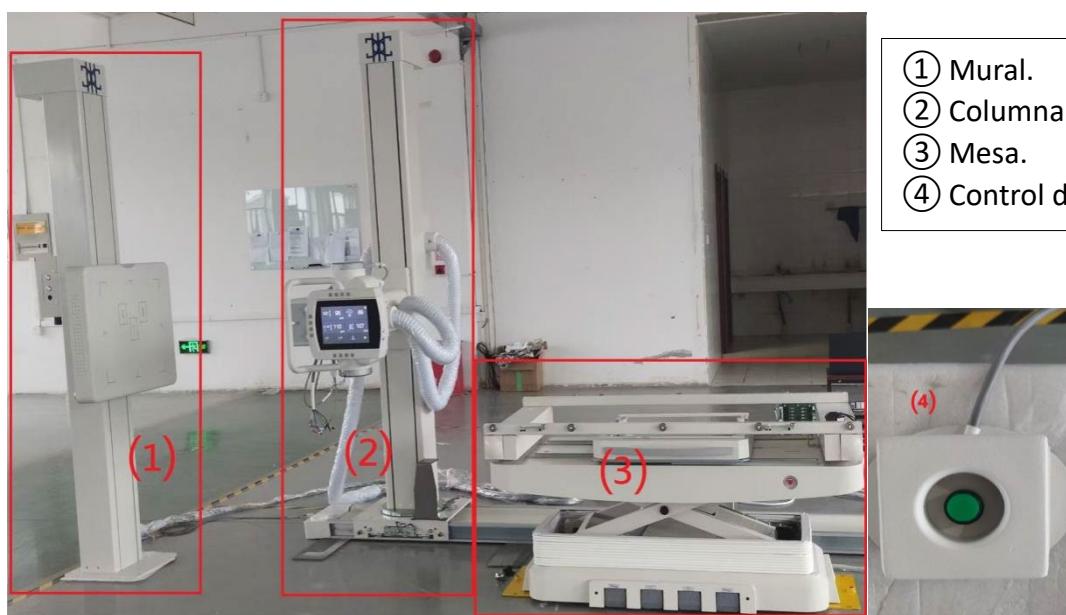

- ① Subir Bucky.
- ② Bajar Bucky.



COLUMNA:



- ① Panel digital de control.
- ② Guía de la columna.

PANEL DE CONTROL - PARTE SUPERIOR:



- ①

Parada de Emergencia.
- ②

Encendido.
- ③

Apagado.

PANEL DE CONTROL - FRENTE:



BOTONES DEL PANEL

1	Subir tubo.	
2	Liberar rotación del tubo.	
3	Liberar desplazamiento columna.	
4	Sin uso.	

5	Bajar tubo.	
6	Liberar rotación del tubo.	
7	Liberar desplazamiento columna.	
8	Sin uso.	
9	Posicionamiento a 1 metro.	
10	Posicionamiento a 1.8 metros.	
11	Posicionamiento a la mesa.	
12	Botón de espinografía.	
13	Seguimiento de posición 1 m.	
14	Seguimiento de posición 1.8 m.	
15	Seguimiento en posición supina	
16	Configuraciones.	

MESA MOTORIZADA




- ① Parada de emergencia.
- ② Pedales de control.



IMPORTANTE: Para el accionamiento de los pedales es fundamental realizar una doble pulsación.

PEDALES DE CONTROL

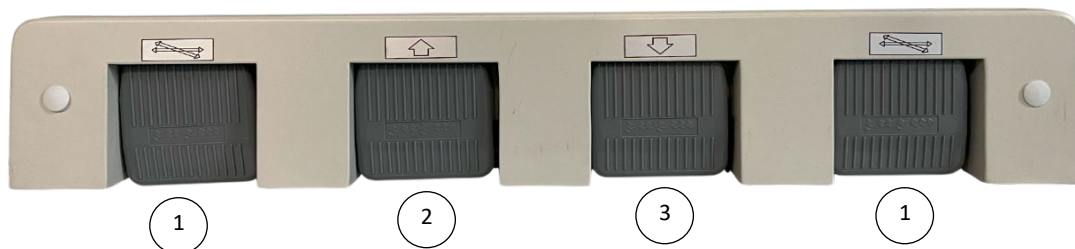

- ① Libera los frenos para libre movimiento.
- ② Subir.
- ③ Bajar.

COLIMADOR



- ① Ajuste de Cortinas Verticales.
- ② Botón de Iluminación.
- ③ Ajuste de Cortinas Horizontales.