

CALIBRACIÓN DEL EQUIPO

NEUMOVENT GRAPH



PREPARAR EL EQUIPO

- ✍ Suministro gases de Alta Presión*
 - ✍ Alimentación eléctrica (Led VAC)*
 - ✍ No se escuchan fugas internas*
 - ✍ No hay pérdidas en las salidas*
-
- ✍ Enciendo pulsando “Reset ”...*



CALIBRACIÓN

✍ Acceder al MENU DE CALIBRACIÓN

✍ Pulsar tecla RESET y mantener

✍ Encender el equipo

✍ Ingresar PASSWORD (Según equipo)

*✍ Si PASSWORD es “incorrecta” accedo
pero no puedo grabar cambios. Sólo
visualización...*



MENU DE CALIBRACIÓN

- ✎ PRESIÓN AMBIENTE (Usuario)***
- ✎ FLUJO AIRE***
- ✎ FLUJO OXÍGENO***
- ✎ VÁLVULA AIRE***
- ✎ VÁLVULA OXÍGENO***
- ✎ SENSORES DE PRESIÓN***
- ✎ VÁLVULA PEEP***
- ✎ COMPENSACIÓN NEUMO***
- ✎ ENTRADAS ANALÓGICAS***
- ✎ OPCIONES INICIALES***
- ✎ NÚMERO DE SERIE***




MENU DE CALIBRACIÓN

- ✎ PRESIÓN AMBIENTE (Usuario)***
- ✎ FLUJO AIRE***
- ✎ FLUJO OXÍGENO***
- ✎ VÁLVULA AIRE***
- ✎ VÁLVULA OXÍGENO***
- ✎ SENSORES DE PRESIÓN***
- ✎ VÁLVULA PEEP***
- ✎ COMPENSACIÓN NEUMO***
- ✎ ENTRADAS ANALÓGICAS***
- ✎ OPCIONES INICIALES***
- ✎ NÚMERO DE SERIE***




PRESIÓN AMBIENTE

- ✍ ATENCIÓN: Este parámetro debe ser modificado desde el “Menu de Usuario”, según el lugar de uso del equipo. Ver tabla según altura SNM.*
- ✍ El usuario aporta un factor de corrección pero no modifica el valor grabado en modo calibración.*
- ✍ Este valor debe ser modificado si se recalibran las curvas de flujo.*
- ✍ Si el valor de “Usuario” es igual al de “Calibración” no actúa la corrección por soft.*

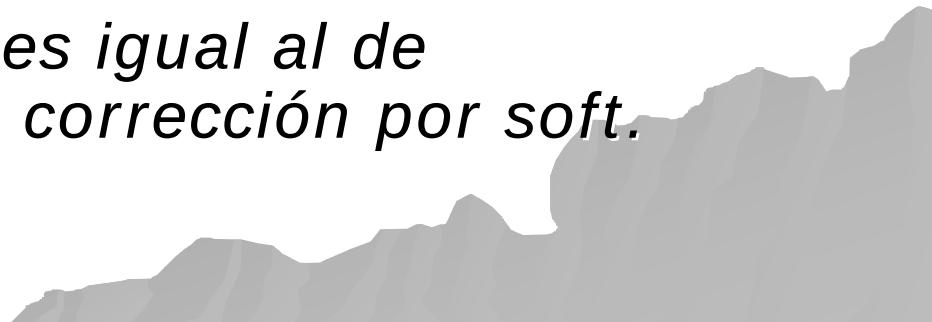

MENU DE CALIBRACIÓN

SECUENCIA

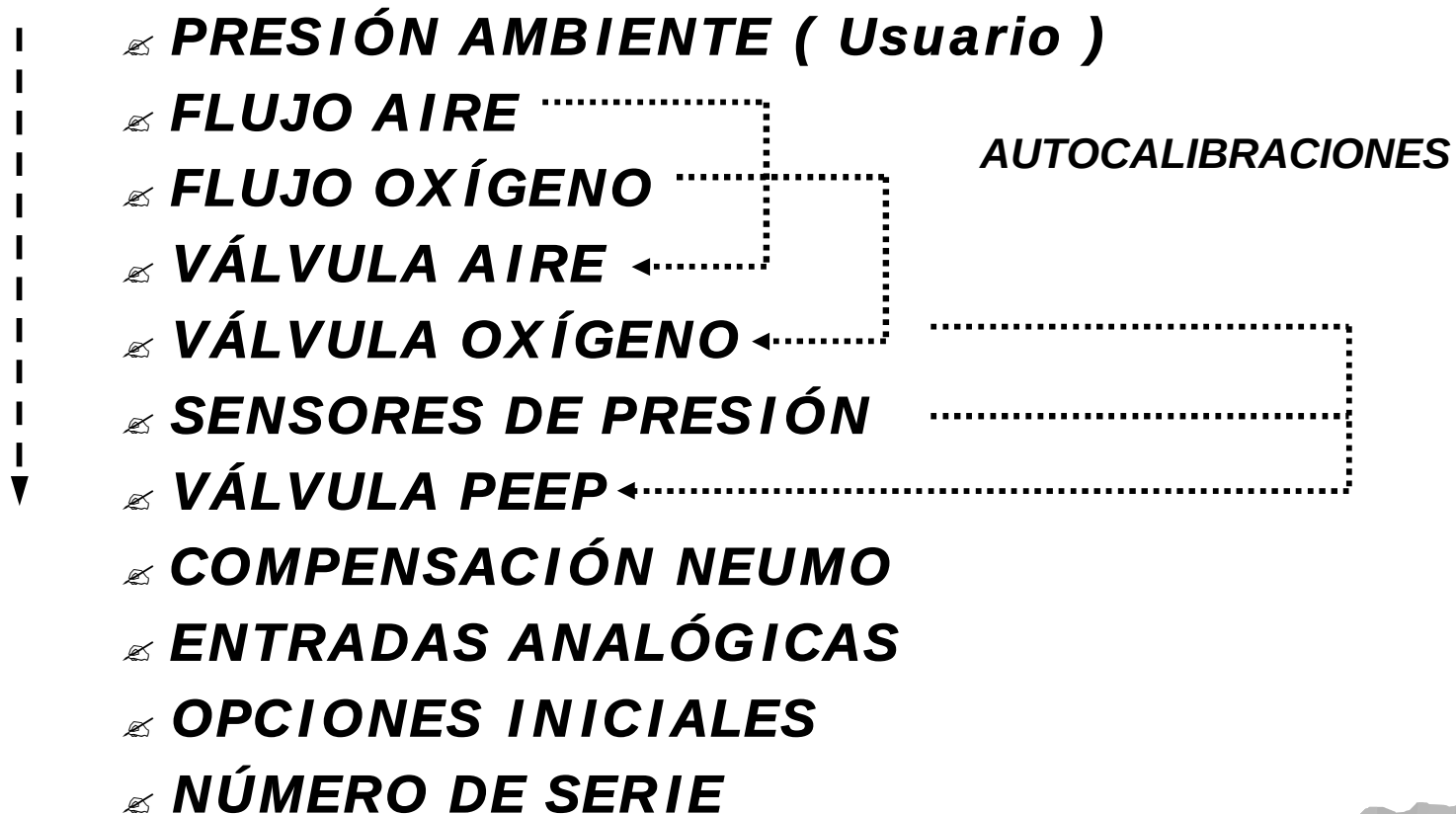

FLUJO AIRE

- ✍ Mediante la apertura manual de la válvula se genera un flujo progresivo, hasta lograr el “Objetivo” en el medidor de flujo patrón. Grabo dicho objetivo y busco el siguiente...*
- ✍ Este flujo provoca un diferencial de presión directamente proporcional en el neumotacógrafo.*
- ✍ Los diferenciales de presión generados determinarán los puntos que conforman la curva de flujo (0 a 160 L/min).*
- ✍ Una vez grabada la curva, al incidir un flujo en el neumotacógrafo el equipo será capaz de determinar su magnitud, en función del diferencial de presión que genera.*



FLUJO O₂

- ✍ Calibración igual que FLUJO AIRE*
- ✍ Los puntos de calibración no coinciden con la curva debido a una compensación por la diferente densidad de los gases.*
- ✍ O₂ es aprox. 10% más denso que el aire.*
- ✍ Nunca calibrar con O₂ !!!*



VALVULAS AIRE – O₂

✍ Menu ✍ Iniciar

✍ Verficar con un manómetro la presión en la línea AP mientras se ejecuta la autocalibración.

✍ Verificar la continuidad de la curva.

✍ Menu ✍ Grabar



SENSORES DE PRESIÓN

		<i>Ref. Low</i>	<i>Ref. High</i>	<i>Lectura en Tiempo Real</i>
<i>Sensor</i>		<i>(Cero)</i>	<i>(Máx)</i>	
<i>BP</i>	<i>Derecho</i>	<i>0000</i>	<i>0000</i>	<i>xx.x cmH₂O</i>
	<i>Izquierdo</i>	<i>0000</i>	<i>0000</i>	<i>xx.x cmH₂O</i>
<i>AP</i>	<i>Aire</i>	<i>0000</i>	<i>0000</i>	<i>x.x Kg/cm²</i>
	<i>Oxígeno</i>	<i>0000</i>	<i>0000</i>	<i>x.x Kg/cm²</i>



SENSORES DE PRESIÓN

<i>Sensor</i>		<i>0 cm H₂O</i>	<i>100 cm H₂O</i>	<i>Lectura en Tiempo Real</i>
<i>BP</i>	<i>Derecho</i>	<i>0400</i>	<i>0800</i>	<i>xx.x cmH₂O</i>
	<i>Izquierdo</i>	<i>0460</i>	<i>0880</i>	<i>xx.x cmH₂O</i>
<i>AP</i>	<i>Aire</i>	<i>0000</i>	<i>0000</i>	<i>x.x Kg/cm²</i>
	<i>Oxígeno</i>	<i>0000</i>	<i>0000</i>	<i>x.x Kg/cm²</i>



SENSORES DE PRESIÓN


<i>Sensor</i>		<i>0 Kg/cm²</i>	<i>5 Kg/cm²</i>	<i>Lectura en Tiempo Real</i>
<i>BP</i>	<i>Derecho</i>	<i>0000</i>	<i>0000</i>	<i>xx.x cmH₂O</i>
	<i>Izquierdo</i>	<i>0000</i>	<i>0000</i>	<i>xx.x cmH₂O</i>
<i>AP</i>	<i>Aire</i>	<i>0530</i>	<i>0840</i>	<i>x.x Kg/cm²</i>
	<i>Oxígeno</i>	<i>0530</i>	<i>0840</i>	<i>x.x Kg/cm²</i>



SENSORES DE PRESIÓN

<i>Sensor</i>		<i>Ref. Low</i> <i>(Cero)</i>	<i>Ref. High</i> <i>(Máx)</i>	<i>Lectura en</i> <i>Tiempo Real</i>
<i>BP</i>	<i>Derecho</i>	<i>0400</i>	<i>0800</i>	<i>0.0 cmH₂O</i>
	<i>Izquierdo</i>	<i>0460</i>	<i>0880</i>	<i>0.0 cmH₂O</i>
<i>AP</i>	<i>Aire</i>	<i>0530</i>	<i>0840</i>	<i>6.0 Kg/cm²</i>
	<i>Oxígeno</i>	<i>0530</i>	<i>0840</i>	<i>6.0 Kg/cm²</i>

Tecla "SENSITIVITY": puesta a cero > Actualiza lectura en tiempo real

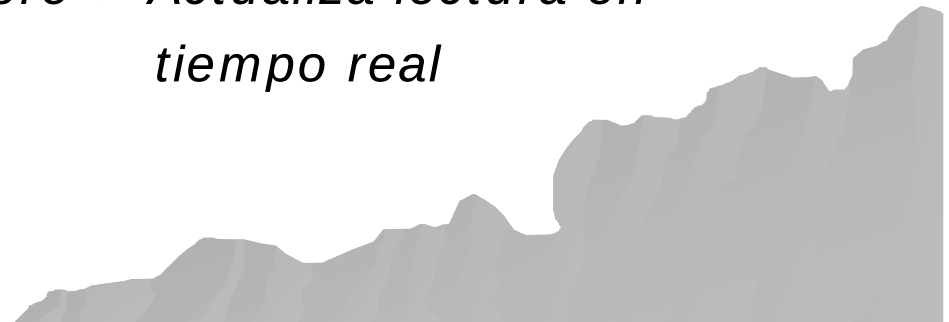

MENU DE CALIBRACIÓN

- ✎ PRESIÓN AMBIENTE (Usuario) ✎**
- ✎ FLUJO AIRE ✎**
- ✎ FLUJO OXÍGENO ✎**
- ✎ VÁLVULA AIRE ✎**
- ✎ VÁLVULA OXÍGENO ✎**
- ✎ SENSORES DE PRESIÓN ✎**
- ✎ VÁLVULA PEEP ***
- ✎ COMPENSACIÓN NEUMO**
- ✎ ENTRADAS ANALÓGICAS**
- ✎ OPCIONES INICIALES**
- ✎ NÚMERO DE SERIE**



*** VALVULA PEEP**

- ✍ *Autocalibración con Válvula Espiratoria y tubuladura estanca.*
- ✍ *Verificar curva característica.*
- ✍ *Subsistema:*

[	<i>Válvula O2</i>	<i>-> Flujo 5 L/min</i>
	<i>Sensor BP</i>	<i>-> Captura valores (curva)</i>
	<i>Válvula PEEP</i>	<i>-> Presión de 0 a 70 cm H₂O</i>
- ✍ *Si falla uno de estos elementos no se realiza la calibración con éxito ... determinar la causa.*



MENU DE CALIBRACIÓN

SECUENCIA

- ✎ PRESIÓN AMBIENTE (Usuario)**
- ✎ FLUJO AIRE**
 - ✎ FLUJO OXÍGENO**
 - ✎ VÁLVULA AIRE** ←.....
 - ✎ VÁLVULA OXÍGENO** ←.....
 - ✎ SENSORES DE PRESIÓN**
 - ✎ VÁLVULA PEEP** ←.....
- ✎ COMPENSACIÓN NEUMO**
- ✎ ENTRADAS ANALÓGICAS**
- ✎ OPCIONES INICIALES**
- ✎ NÚMERO DE SERIE**



MENU DE CALIBRACIÓN

- ✎ PRESIÓN AMBIENTE (Usuario)***
- ✎ FLUJO AIRE***
- ✎ FLUJO OXÍGENO***
- ✎ VÁLVULA AIRE***
- ✎ VÁLVULA OXÍGENO***
- ✎ SENSORES DE PRESIÓN***
- ✎ VÁLVULA PEEP***
- ✎ COMPENSACIÓN NEUMO***
- ✎ ENTRADAS ANALÓGICAS***
- ✎ OPCIONES INICIALES***
- ✎ NÚMERO DE SERIE***



COMPENSACIÓN DEL NEUMOTACÓGRAFO

- ✍ Aporta una corrección en la medición de los Volúmenes generados.*
- ✍ Autocalibración igual que PEEP.*



ENTRADAS ANALÓGICAS

ENT. ANALOGICAS

Serie No: 06 10 1 001

REV: G1-CE-2N-060635-NE

Calibrado: 26/09/06

Flujo Aire :	0070	0280
Flujo Oxíg:	0070	0280
Pres. Der.:	0400	1600
Pres. Izq. :	0400	1920
Flujo Esp :	0070	0280
Fte. Oxíg :	0530	2120
Fte. Aire :	0530	2120
Energía :	0882	3528
Celda Ox :	0000	0000

Val.Aire :	0
Val.Oxig:	0
Val.Bloq:	435
Val.Peep:	0


Carga: NO
Fuente: Principal
Ventilador: NO
Tecla: 12

1534 Hs

OPCIONES INICIALES

✍ *Graba los valores por “default” con que arranca el equipo.*

✍ **OPCIONES:**

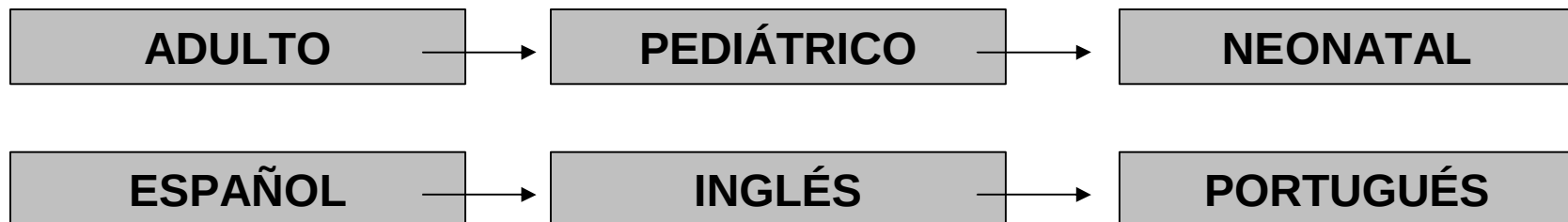

NÚMERO DE SERIE

- ✍ Sólo se modifica en caso de reemplazo de Placa CPU.*
- ✍ Requiere un segundo PASSWORD.*
- ✍ Debe quedar registrado el cambio de Placa CPU.*

