



		
Columnas	Motor lineal	Nº lechos
		
Longitud máx. estándar	Anchura máx. estándar	Alturas Estándar
		
TR / ATR	Silla cardíaca	Lateralización
		
CPR	SWL	MPW

Características

La cama de UCI HiTech ACT está dotada de la tecnología más avanzada para el cuidado intensivo del paciente.

Compuesta por 3 columnas rectangulares de elevación y lateralización y de múltiples opciones para satisfacer las necesidades del cuidado del paciente y optimizando la labor de los cuidadores.

Alguna de sus características principales son:

- Para facilitar su transporte:

Ligera, dispone de unas ruedas de alta resistencia a la rodadura, al desgaste y a la oxidación, así como un mínimo ruido al realizar los movimientos.

Tiene un sistema de freno centralizado mediante barra situado en la zona del piecero.

- Sencilla e intuitiva de manejar:

Sistema de elevación y lateralización mediante 3 columnas rectangulares, el uso de columnas, facilita la limpieza de la cama y por tanto reduce las posibilidades de infecciones.

Control principal de la cama mediante una pantalla táctil instalada en el piecero, con-

trolando con ella todos los movimientos de la cama así como para controlar el sistema de pesaje de la misma.

La cama dispone una batería que funciona en caso de que la cama se desenchufe de la corriente eléctrica pudiendo realizar más de 300 movimientos completos.

- Favorece el bienestar del paciente:

La lateralización de la cama permite una mejor oxigenación para evitar complicaciones y facilita el cuidado diario del paciente.

Su sección de respaldo radio transparente, preparada para Rx.

Extensibilidad del lecho, hasta en 26 cm.

Sistema de doble regresión, reduce la presión en la zona pélvica reduciendo de esta manera el riesgo de úlceras por presión (15 cm).

Sistema del posicionado de los pies del paciente en varias posiciones gracias a un amortiguador.

- Otras mejoras:

3 Lechos fabricados en HPL (Tronco, extremidades y pies) desmontables sin herramientas y lecho central fijo, fabricado en chapa.

Lechos fáciles de limpiar con gran protección, al igual que la cama, frente a la formación y propagación de bacterias.

Barandilla fabricadas en polipropileno con zona de agarre y sistema plegado mediante pistón de gas, ayudan a la incorporación y a la salida de la cama.

Cabecero y piecero fácilmente extraíbles con sistema de bloqueo.

4 cilindros de protección en las esquinas que evitan los choques minimizando los impactos y el deterioro de la cama.

2 guías en ambos laterales con 4 ganchos portadrenajes incluidos en cada una de ellas.

4 arquillos de retención del colchón en tórax y pies.

Vinilos completamente personalizables.

- Además la cama HiTech ACT dispone de una amplia gama de accesorios y complementos que permite cumplir con las necesidades del hospital y del paciente, para su confort y bienestar.




Información técnica

Longitud total con cabecero anclado y piecero	227 cm. ± 1 mm.
Anchura total con barandillas	98 cm. ± 1 cm.
Altura mínima / máxima del lecho	51 / 91 cm. ± 1 cm
Altura libre desde suelo hasta sistema de columnas	5 cm. ± 1 cm.
Altura libre paso de grúas	18 cm. ± 1 cm.
Diámetro de las ruedas	15 cm. ± 1 cm.
Anchura de los lechos	83 cm.
Longitudes de los lechos	79 / 17 / 32 / 62 cm.
Longitud extensible zona de extremidades	26 cm.
Doble regresión de los lechos	15 cm. ± 1 cm.
Ángulo inclinación respaldo	65° ± 5°
Ángulo inclinación extremidades	47° ± 2°
Ángulo inclinación pies	18° / 7° ± 2°
Ángulos posiciones Trend / Antitrend	18° / 18° ± 2°
Ángulo inclinación Lateralización	20° ± 2°
Peso máximo usuario (MPW)	185 kg.
Carga máxima de seguridad (SWL)	250 kg.
Peso de la cama en vacío	Desde 125 kg. hasta 150 kg.
Dimensiones del colchón recomendado	85 cm x 200 cm.

Configuración

Estándar			
Protección	Transporte	Bienestar	Otros
Barandillas integrales	Dobles carenadas Ø150mm	Amortiguador elevación pies	Ganchos para drenajes
Cabecero curvo extraíble	Freno centralizado	Lechos de HPL extraíbles	Pesaje integrado en pantalla
Cabecero anclado		Lecho central de chapa	Batería
			Vinilo Pardo P.288 (1)

Opcional			
Protección	Transporte	Bienestar	Otros
Barandillas salida segura	5ª rueda	Mesa bajo piecero	Alarma de freno
			Luz bajo cama (2)
			Vinilo Personalizado (3)

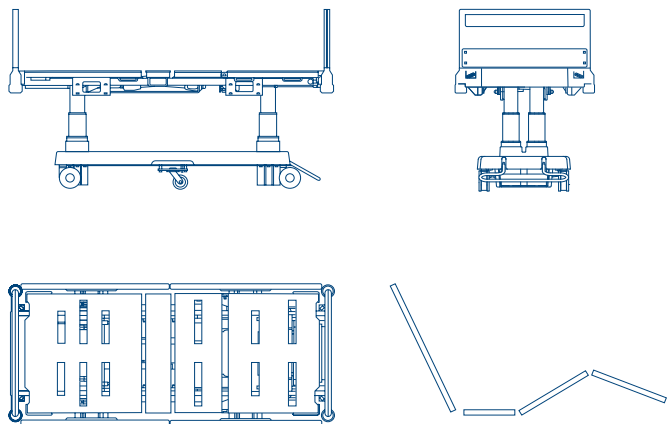


Configuración de los Mandos de Control

Mando obligatorio en todas las camas



Pantalla táctil


Otros mandos a añadir

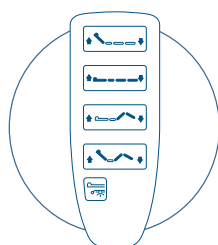


Mando de paciente



Membrana de barandillas

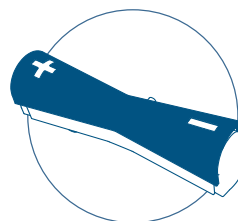

Pedal de elevación

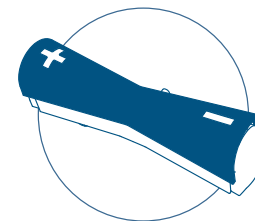

Pedal de lateralización

Información eléctrica

Elevación y Lateralización de la cama	3 columnas
Elevación del respaldo	Motor lineal
Elevación de las extremidades	Motor lineal
Tensión y	110 V ó 230 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Protección descarga eléctrica / penetración de líquidos	Clase I / Tipo B / IPX6
Consumo máximo	Máx. 3 15A (máximo 400 W)
Operación intermitente del motor	10% 2 min. - 18 min.

Accesorios



Portasueros
2 ganchos




Portasueros
4 ganchos



Potencia



Potencia
Techno

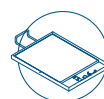

Portaplacas



Arco
balcánico



Mesa abatible



Portabom-
bonas

Certificación

- Norma UNE EN ISO 12100.
- Norma UNE EN 20324.
- Norma UNE EN 60204-1.
- Norma UNE EN 60601-1.
- Norma UNE EN 60601-1-2.
- Norma UNE EN 60601-2-52.
- Norma UNE EN 45501-16.

Ensayos EN 60601-2-52:2010

- ITA (Instituto tecnológico de Aragón) Ensayos Eléctricos y Electromagnéticos.
- IBV (Instituto Biomecánico de Valencia) Ensayo Mecánico de Barandillas.

INCOMPATIBILIDADES:

2 - La luz bajo cama deberá configurarse junto con alguno de los siguientes mandos:

- Membrana de barandillas
- Mando paciente con luz

NOTAS:

1 - Los vinilos estándar de las camas tendrán como características:

- Color Azul P.288
- Sólo llevarán el Logo Pardo en color blanco

3 - Los vinilos personalizados de las camas, irán condicionados según la cantidad del pedido (Ver plazos de entrega)

- Color: Se intentará realizar el fondo en un sólo color.
- Logotipo: Se podrá incluir el logotipo del cliente. Se intentará hacer en blanco. A no ser que el cliente solicite lo contrario.

PLAZOS DE ENTREGA:

Camas (Desde la Mecanización del pedido).

Camas HiTech ACT Estándar:

- Pedido < 5 unidades: Consultar con producción
- Pedido < 75 unidades: 5 - 6 semanas
- Pedido > 75 unidades: 7 - 8 semanas

Camas HiTech ACT Especiales:

- Consultar con producción.

Vinilos (Desde la Mecanización del pedido).

- Pedido < 25 unidades: Se hace por impresión digital. Se pueden añadir algún color. Plazo normal: 10 días.
- Pedido > 25 unidades: Se hace por serigrafía. Cuantos más colores, mayor es el precio. Plazo normal: 3 semanas.

MECANIZADO DE PEDIDOS:

Códigos que se deben mecanizar en un pedido:

- Código CAMA: (Ejm: SC8010600000XXX)
- Código BARANDILLAS: (Ejm: BC8011800000XX)
- Código CABECERO - PIECERO (Ejm: RC801220000000XXX)
- Código VINILOS (Ejm: AC801240000000XX)
- Código MANUALES. (Ejm: XX849990000000XXX)
Enviar los archivos por pdf.
- Código DOCUMENTACIÓN (Ejm: XX849980000000XXX)
Únicamente mecanizar la ficha rápida, una por unidad de cama en el pedido.
- Código EMBALAJE: AC8012100000023
- Código ACCESORIOS, en función del pedido.